


BPA Software zum aponorm® Professionell Blutdruckmessgerät

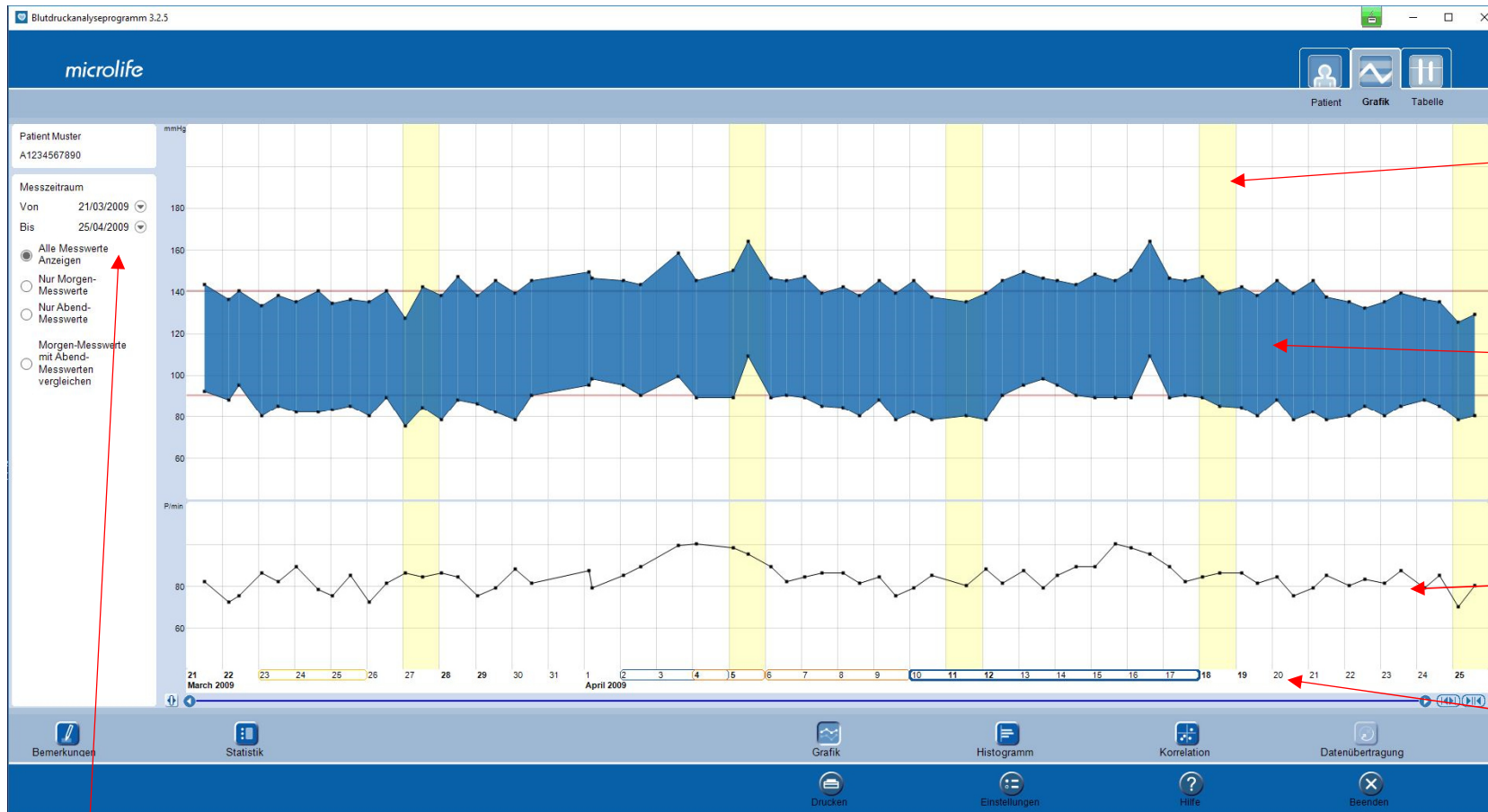

Gelbe vertikalen Linien: markiert die Tage in denen neue Daten synchronisiert wurden

Oberer Rand der Kurve entspricht dem systolischen Wert, unterer Rand dem diastolischen Wert, der aufgezeichnet wurde, rote Linien markieren den Grenzwert Systole/Diastole zum Bluthochdruck.

Pulskurve (Schläge/ Min.)

Tag im Monat; die farblich markierten sind Tage, an denen der Benutzer einen Kommentar hinterlegt hat (z.B. Habe an diesem Tag später gemessen als sonst, Medikament anders eingenommen als sonst etc.)

Hier wählt man den Zeitraum aus, den man betrachten möchte

Patient Muster A1234567890	Datum	Zeit	MAM	PAD	SYS mmHg	DIA mmHg	Puls P/min	MAP	Bemerkungen
Messzeitraum	21/03/2009	12:16 P		N.A.	143	92	82	109	
Von 21/03/2009	22/03/2009	04:21 A		N.A.	136	88	72	104	
Bis 25/04/2009	22/03/2009	10:58 A	•	N.A.	140	95	75	110	
<input checked="" type="radio"/> Alle Messwerte anzeigen	23/03/2009	02:25 A		N.A.	133	80	86	97	
<input type="radio"/> Nur Morgen-Messwerte	23/03/2009	01:09 P	•	N.A.	138	85	82	102	
<input type="radio"/> Nur Abend-Messwerte	24/03/2009	01:07 A		○	135	82	89	99	
<input checked="" type="radio"/> MAM-Messwerte anzeigen	24/03/2009	03:37 P	•	○	140	82	78	101	
<input type="radio"/> PAD-Messwerte anzeigen	25/03/2009	01:16 A		○	134	83	75	100	
	25/03/2009	12:58 P		○	136	85	85	102	
	26/03/2009	01:28 A	•	•	135	80	72	98	
	26/03/2009	01:07 P	•	•	140	89	81	106	
	27/03/2009	01:13 A	•	○	127	75	86	92	
	27/03/2009	12:49 P		○	142	84	84	103	
	28/03/2009	01:09 A		○	138	78	86	98	
	28/03/2009	12:22 P	•	•	147	88	84	107	
	29/03/2009	01:19 A	•	○	138	86	75	103	
	29/03/2009	01:20 P		○	145	82	79	103	
	30/03/2009	02:14 A		○	139	78	88	98	
	30/03/2009	01:21 P	•	○	145	90	81	108	
	01/04/2009	03:15 A		○	149	95	87	113	
	01/04/2009	05:20 A		○	146	98	79	114	
	02/04/2009	01:51 A	•	○	145	95	85	111	
	02/04/2009	01:35 P		○	143	90	89	107	
	03/04/2009	02:19 P		○	158	99	99	118	
	04/04/2009	02:17 A		•	145	89	100	107	
	05/04/2009	02:39 A	•	○	150	89	98	109	
	05/04/2009	12:56 P		○	164	109	95	127	
	06/04/2009	03:54 A		○	146	89	89	108	
	06/04/2009	02:18 P		○	145	90	82	108	
	07/04/2009	02:17 A	•	•	147	89	84	108	
	07/04/2009	01:23 P		○	139	85	86	103	
	08/04/2009	03:42 A		○	142	84	86	103	
	08/04/2009	02:19 P	•	○	138	80	81	103	
	09/04/2009	03:29 A	•	○	145	88	84	107	



Bemerkungen



Statistik



Datenübertragung



Drucken



Einstellungen



Hilfe



Beenden

Ein schwarzer Punkt bedeutet, dass diese Messung im Mehrfachmessmodus durchgeführt wurde, kein Punkt = normale Einfachmessung

Beim Professionell-Modell heißt diese Spalte „Afib“ (statt PAD). Ein schwarzer ausgefüllter Punkt bedeutet, dass bei der Messung Vorhofflimmern erkannt wurde. Nicht ausgefüllter Punkt = kein Vorhofflimmern erkannt

In dieser Spalte wird der „MAP“ (Mean Arterial Pressure) errechnet = Mittlerer Arterieller Druck. Der MAP gilt als Parameter für die Organdurchblutung. Die Normalwerte bewegen sich zwischen 70 und 105 mmHg. Sinkt der MAP dauerhaft unter 60 mmHg, besteht die Gefahr, dass die Organe des Körpers, einschließlich des Gehirns, mit Sauerstoff und Nährstoffen unterversorgt sind und dadurch geschädigt werden können.